



MEDICUR®

Használati útmutató

ADVANCED
MEDICAL
SYSTEMS

AMS GmbH
Hauptstr. 26
97990 Weikersheim, Germany

TEL:+49 (0) 79 34 / 99 34 89-0
TEL:+49 (0) 79 34 / 99 34 89-44
E-MAIL: info@ams-ag.de
www.ams-ag.de

Tartalom

1.0	Használati útmutató	3
1.1	A kezelés és felhasználás alapjai	3
1.2	Beállítások – alkalmazási területek	4
1.3	Víztartalmú élelmiszerek energetizálása és harmonizálása.....	6
1.4	Technikai adatok	6
1.5	Elemcsere	7
1.6	Garancia.....	7
1.7.1	Szállítás terjedelme.....	7
1.7.2	Karbantartás / kezelés / biztonságtechnikai ellenőrzés	7
1.8	Vigyázat	8
1.9	Funkcióellenőrzés.....	8
2.0	A felhasználás alapjai és funkciója	9
2.1	A bioenergetika rezgések a megelőzés és a gyógyulást segítik elő.....	11
2.2	Mágneses mezővel a természet és környezet zavarai ellen.....	11

1.0 Használati útmutató

A **MEDICUR**[®] egy mágnesterápiás készülék, mely akkumulátoron keresztül elektromágneses jeleket bocsát ki. Kicsi, könnyen kezelhető készülék, mely természetesen módon fejti ki hatását.

A **MEDICUR**[®] a természetben előforduló harmonikus és az ember számára fontos bioenergetikai rezgéseket állít elő. (lásd: 2.0 a felhasználás alapjai és funkciója).

A **MEDICUR**[®] EU-szerte a gyógyászati termékekről szóló törvény szerint fájdalomcsillapítónak minősül.

1.1 A kezelés és felhasználás alapjai

A **MEDICUR**[®] működésének alapja a gyenge, gyorsan változó elektromágneses mező (mind alacsony, mind magas frekvencián – gigahertzig).

A két frekvencia kombinációja azért ilyen hatékony, mert a testi ritmusokkal áll összhangban. A **MEDICUR**[®] által kibocsátott frekvenciák serkentik a szervezet endorfin termelését, mely csökkenti a fájdalomérzetet. A fájdalomcsillapító terápiára 3 frekvencia alkalmas, melyek a zavartalan természetet „leolvassák”, s melyek a **MEDICUR**[®] által előállításra kerülnek.

1. A „**Schumann-frekvencia**”

A földfelszín és az ionoszféra alacsony sajátfrekvenciája; YANG-jel (lásd: 2.0 a felhasználás alapjai és funkciója).

2. A „**geomágneses frekvencia**”

A Föld mágneses mezőjének modulációja a nyomelem sajátfrekvenciája által; YIN-jel (lásd: 2.0 a felhasználás alapjai és funkciója).

3. A „**napfrekvencia**”

(URH-frekvencia) A természetes napfény URH-frekvenciáinak összhangja.

A három ismertetett frekvencia együtt fejti ki szinergetikus hatását. A **MEDICUR**[®] és a piacon kapható több más mágnesterápiás készülék között a különbség a frekvenciaspektrum komplexitásából adódik. A megfelelő frekvencia a megfelelő kombinációban!

A Schumann-hullámok, a geomágneses hullámok és a napfény hullámai fontos jelek, melyek megfelelő biológiai állapotunkat elő- vagy helyreállítják.

A HARMONIKUS REZGÉSEK ELŐSEGÍTIK AZ ÖNGYÓGYÍTÁST!

A mikroelektronikának köszönhetően lehetségessé vált, hogy a természetes, ill. harmonikus jeleket és a biológiai sejtrezgéseket meghatározott frekvencia-adagolással stimuláljuk, így az emberek és jó közérzetük érdekében alkalmazzuk.

Az orvostudományban a beteg állapotot „diszharmonikusnak”, az egészséges állapotot „harmonikusnak” tekintik. Ha a test a megfelelő harmonikus jeleket kapja, a szervezet azokat használni tudja, és az öngyógyítási folyamat megkezdődik.

Hogyan kapcsolhatom be a MEDICUR®-t?

A **MEDICUR®** három nyomógombbal rendelkezik: egy kék, egy zöld és egy piros gombbal. Ezáltal három lehetőség közül választhat és a megfelelő gombot megnyomva hozhatja működésbe az eszközt. Az adott lámpa világítani kezd, a megfelelő LED pedig a választott frekvencia szerint gyorsabban vagy lassabban villog. Tíz perc után a **MEDICUR®** automatikusan kikapcsol. Az „OFF” gomb segítségével a **MEDICUR®** idő előtt kikapcsolható, ill. másik frekvencia/gomb választható

*A **MEDICUR®** a gyógyászati termékekről szóló törvény szerint fájdalomcsillapítónak minősül, ezt klinikai tanulmányok igazolják.*

FIGYELEM! A fájdalomcsillapító közvetlen alkalmazására vonatkozó javallatok (lásd: táblázat a 8. oldalon) felhasználóink többéves tapasztalataiból vezethetők le. Ez idáig sem klinikai tanulmányok, sem a gyógyászati termékekről szóló törvény nem igazolta azok alkalmazását.

Fontos tudni, hogy a **MEDICUR®** hatótávolsága körülbelül 40 cm.

Mágneses mezeje ruhán keresztül is hat, annak pedig szintén nincs jelentősége, hogy a készüléket milyen irányba fordítja.

1.2 Beállítások – alkalmazási területek

A **MEDICUR®** használata során a következő beállítások lehetségesek:

Beállítás	Frekvencia	Felhasználóink tapasztalatai
piros	7,8	Fájdalomcsillapítás* (fejfájás, migrén, ízületi fájdalom), arterioszklerózis, főnbetegség, operáció utáni gyógyulás gyorsítása, koncentrációkészség hiánya, figyelmetlenség, reuma, víztartalmú élelmiszerek energetizálása
kék	3,0	Fájdalomcsillapítás* egyúttal pihentető (nyugtató) hatással, nyugtalanság, idegesség
zöld	20,0	Fájdalomcsillapítás* egyúttal élénkítő hatással, energiahány, erőtlenység, gyomorsav, kimerülés

*Figyelem: A gyógyászati termékekről szóló törvény csak a **MEDICUR®** fájdalomcsillapító hatását ismeri el és engedélyezi.

Emellett fontos: *Nem minden ember reagál egyformán.* Ezért előfordulhat, hogy a migrént a „**piros**” beállítás (7,8 Hz) helyett, a „**zöld**” beállítás (20,0 Hz) enyhíti tartósan. Ezt Önnek kell egyénileg kipróbálnia.

Általánosan elmondható, hogy az alacsony frekvencia inkább nyugtatólag, a magasabb frekvencia inkább élénkítőleg hat. A „piros” beállítás az esetek túlnyomó többségében sem élénkítő, sem nyugtató hatással nem bírt, hanem kiegyensúlyozó, stabilizáló hatással volt a felhasználókra.

Hogyan alkalmazzam a MEDICUR®-t?

A **MEDICUR®**-ttépőzáras felszereléssel szállítják ki. Ezt az eszközt fájdalom gócpontjánál rögzítheti, a **MEDICUR®**-t pedig a kezelendő területre helyezheti.

A **MEDICUR®** 40 cm-es távolságon belül hat, ruhán keresztül is. Minden használat előtt javasolt 10 percet ülve vagy fekvé pihenni.

A megelőzés érdekében javasoljuk naponta délelőttönként 10 percre a felhasználást testközelben. (A **MEDICUR®** 10 perc használat után automatikusan kikapcsol.) Az öngyógyító erők alkalmazásához elengedhetetlen, hogy a testből a káros anyagokat kivezessük. Ehhez helyezzük a **MEDICUR®**-t köldökcsakra, illetve a ygomorszáj (solarplexus) közelébe, valamivel a köldök fölé. Ugyanez érvényes energiahiány vagy levertség esetén is. Használat után javasolt ásványoktól mentes víz kortyonkénti fogyasztása. Ez tudvalevőleg segít a mérgező anyagok szervezetből való kiürítésében.

Igény esetén (pl.: védekezőképesség aktiválása, feszültség oldása) a **MEDICUR®** maximum háromszor használható naponta. Elsősorban a csecsemőmirigy, a köldökcsakra, ill. a fájdalomgóc közelében használandó. A készülék műanyag borítása miatt esetlegesen felmerülő (ám elismerten valószínűtlen) allergiás reakció elkerülése érdekében az eszköz nem kerülhet közvetlen kapcsolatba a bőrfelülettel.

Estéenként, ill. éjszaka csak a „kék” beállítás (3 Hz) használata ajánlott **AMEDICUR®** az elalvás, ill. az alvás idejére a párna alá helyezhető. 10 perc használat után a készülék automatikusan kikapcsol.

A csecsemőmirigy a mellkas közepén található, pontosan a mellcsont felső része mögött. A köldökcsakra, a szimpatikus idegrendszer csakrája – a vegetatív idegrendszerhez tartozik – a köldöktől körülbelül két ujjal feljebb található. A csecsemőmirigy a test védekező rendszerének fontos szerve. Szintén felelős a nyirokáramlásért a testben. A nyirokrendszer idegen anyagokat, sejtmérget, és hulladék anyagokat vesz fel, és szállít a véráramba, hogy azok kiválaszthatóvá váljanak.

A csecsemőmirigy felügyeli és szabályozza az energia áramlását a szervezet energiarendszerében, azonnali kiigazításokat végez a kiegyensúlyozatlanságok kiküszöbölése és a test energiája egyensúlyának helyreállítása érdekében.

A csecsemőmirigy teremt kapcsolatot a szellem és a test között, hiszen ez az első szerv, amelyet a szellemi-pszichikai tényezők és a stressz befolyásol (lásd: Dr. J. DIAMOND: „A test nem hazudik” «der Körper lügt nicht»).

Figyelem – ellenjavallatok

Az egyes felhasználások között többórás terápiás szünetet kell beiktatni. Tartósabb felhasználás gyengítheti a készülék hatását.

Használata nem ajánlott: szívritmus szabályozót használó, szívelégtelenségben szenvedő pácienseknek (szívgyengeség / szívizomgyengeség) és terhesség alatt.

Természetesen a **MEDICUR**[®] nem minden esetben és minden személy esetén vezethet eredményre. Amennyiben a **MEDICUR**[®] többszörös használata sem segít, a mélyebb ok kivizsgálandó és kezelendő.

Ebben az összefüggésben hangsúlyozandó, hogy a gyógyászati termékekről szóló törvény szerint a termék csupán fájdalomcsillapítónak minősül. Az általunk javasolt további felhasználási lehetőségek (táblázat a 8. oldalon) csupán felhasználóink tapasztalatait tükrözik.


1.3 Víztartalmú élelmiszerek energetizálása és harmonizálása

A víztartalmú élelmiszerek – beleértve az italokat (pl.: ásványvíz)– energetizálása és harmonizálása a **MEDICUR**[®] piros gombjának megnyomásával, és egyszerűen 10 pernyi közvetlen közelbe helyezéssel történik (ne feledkezzünk meg a 40 cm-es hatótávolságról).

Az energetizálás tartósságának biztosítása érdekében a kezelés után közvetlenül erősen rázzuk meg kb 20 alkalommal a vizes üveget (lásd: Homeopátiás anyagok előállításának eljárása).

Amennyiben az italt azonnali fogyasztásra szánják (20 percen belül), a rázás kihagyható.

1.4 Technikai adatok

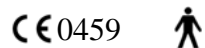

A termék megfelel a következőknek: IEC 417 (B típus), EN 60601-1:1990.

Gyártó:

SnowdenHealthcare, 37 AbbeyRoad, West Bridgeford, GB-Nottingham NG2 5NG

Besorolás:

A **MEDICUR**[®] gyógyászati eszköz (II.b osztály), amely gyógyászati eszközökre vonatkozó követelményeknek megfelel (93/42/EGK) és a 0459 CE jelölést viseli.

Méret: 25 x 76 x 110 mm

Súly: 108 g

Alacsony frekvenciájú tekercs: (LF): 2 kHz-jel maximum 50 kHz-es felhullámmal, választás szerint 3 Hz-es, 7,8 Hz-es vagy 20 Hz-es bázisfrekvenciával modulálva.

Ultraszín hullámú tekercs (URH) (kiegészítőleg) 250 MHz-cel (a fent említett alacsony frekvenciával modulálva) és felhullámokkal

Az elektromágneses sugárzás jel-intenzitása az EN 60601-1-2: 1993 EMC szabvány szerint megengedett értéken belül marad.

Áramellátás: beépített elem
Elemtípus: 9V-os elem
(pl.: Varta 3022/4022)

Elem élettartama: 3 hónap normál használat esetén (napi 3 terápia)

Első engedélyezés IPXO szerint
Elektrosokk elleni biztonsági fok: B típus
Megengedett környezeti hőmérséklet: + 10 °C-tól + 40 °C-ig
Megengedett relatív páratartalom: 30 %-tól 75 %-ig

Felhasználás: 10 perces terápia (automatikus kikapcsolás). Közvetlen megismétlése lehetséges, de nem ajánlott.

1.5 Elemcsere

Túl alacsony teljesítmény esetén a „LOW BATTERY” felirat felvillan. Nyissa fel az elemtartó rekeszt a készülék hátoldalán és cserélje ki az elemet. Figyeljen a pólusokra, és helyezze be az elemet helyesen.

Elemtípus: Varta 3022/4022, GP1604G vagy EverReady PP3 (9V-os elem)

1.6 Garancia

A vásárlás dátumától számított 2 év garancia szakszerű használat esetén. Az elemre nem vonatkozik a garancia.

1.7.1 Szállítás terjedelme

A **MEDICUR**[®] csomag tartalmazza az elemet, a tépőzárat, és a használati útmutatót.

1.7.2 Karbantartás / kezelés / biztonságtechnikai ellenőrzés

A **MEDICUR**[®] alapvetően nem igényel karbantartást, a gyógyászati termékekről szóló törvény szerint azonban a készüléket legalább kétevente a megfelelő biztonságtechnikai ellenőrzésnek kell alávetni. Ezen előírás be nem tartása a készülék engedélyének visszavonását vonja maga után.

Természetesen ez akkor is érvényes, ha az eszköz hibás működésére utaló jelek merülnek fel, vagy ha az eszköz a megengedettnél nagyobb eltérést mutat a helyes működéstől. A biztonságtechnikai ellenőrzés elvégzése érdekében vegye fel velünk a kapcsolatot

AMS gmbh, Hauptstr. 26,

D-97990 Weikersheim.

Fon +49 (0) 79 34 – 99 34 89-0

A **MEDICUR**[®] tisztításához használjon nedves törlőt és lágy szappant.

1.8 Vigyázat

- A bekapcsolt eszközt ne helyezzük mágneses szalaggal ellátott bankkártya vagy telefonkártya mellé, mivel az kárt tehet azokban.
- A **MEDICUR**[®] nem kerülhet közvetlen kapcsolatba folyadékkal, nyílt lánggal vagy forróssággal.
- Ne alkalmazza a készüléket könnyen gyulladó anyagok jelenlétében.
- Ne kapcsolja be az eszközt repülőút során fel- és leszálláskor.
- Ne kapcsolja be az eszközt reptéri ellenőrzés stb. során.
- A készülék tisztításához használjon nedves törlőt és lágy szappant.
- Vigyázat! Elektromágnesesen zavart környezetben a **MEDICUR**[®] jele romolhat.
- A szivárgás, és a készülékben okozott kár elkerülése érdekében távolítsa el az elemet a készülékből (lásd: 1.6), ha a **MEDICUR**[®] -tvárhatóan hosszabb időn keresztül nem kívánja használni.

A **MEDICUR**[®] nem tartalmaz veszélyes anyagokat és élettartama végén elektronikus hulladékként kezelhető.

A készülék műanyag borítása miatt esetlegesen felmerülő (ám elismerten valószínűtlen) allergiás reakció elkerülése érdekében az eszköz nem kerülhet közvetlen kapcsolatba a bőrfelülettel.

1.9 Funkcióellenőrzés

A lüktető mágneses mező működésének ellenőrzése érdekében járjon el a következők szerint:

Vegyen egy rádiót, állítsa be az „MW” funkcióra, helyezze a **MEDICUR**[®]-ta beépített antennák közelébe, és nyomja meg a piros, a zöld, vagy a kék gombot. A frekvenciák felhullámai a küldő-fogadó elv alapján hallhatóvá válnak.

Miért nem villog a LED a készülék bekapcsolásakor?

ok:	lemerült az elem
megoldás	cserélje ki egy új elemre

Kicseréltem az elemet, de a készülék ennek ellenére sem működik.

ok:	rosszul helyezte be az elemet
megoldás	helyezze el megfelelően az elemet

Amennyiben a **MEDICUR**[®] továbbra sem működik, hívjon fel minket, vagy küldje el nekünk az eszközt a megfelelő hibaleírással és a garancialevéllel együtt a következő címre: AMS GmbH, Hauptstr. 9, D-97990 Weikersheim, Germany. Azonnal felvesszük önnel a kapcsolatot!

2.0 A felhasználás alapjai és funkciója

Mágnesoterápia – gyógymód vitathatatlan jövővel


A **MEDICUR**[®] mágnesoterápiás eszköz, melynek fejlesztője a világhírű biofizikus, Dr. rer. nat. W. LUDWIG. A mágneses terápia egy elektromágneses mezőnek köszönhető, mely a zavartalan természetet „olvassa le”, és amely ezt megfelelő viszonyok közt leképezi.

A zavartalan természetben az ember számára bionergetikai szempontból fontos jelek találhatók: **Schumann-, geomágneses-, és napfrekvencia.**

Schumann-frekvenciák

A földfelszínt az ionoszféra veszi körül kb. 100 km magasságban. Mint a hangszerek esetében, sajátfrekvenciák jönnek létre ebben a hatalmas üregrezonátorban, az ún. Schumann-frekvenciák (nevét feltalálójáról, W. O. Schumann fizikusról kapta)

A Schumann-frekvenciák kiterjedése

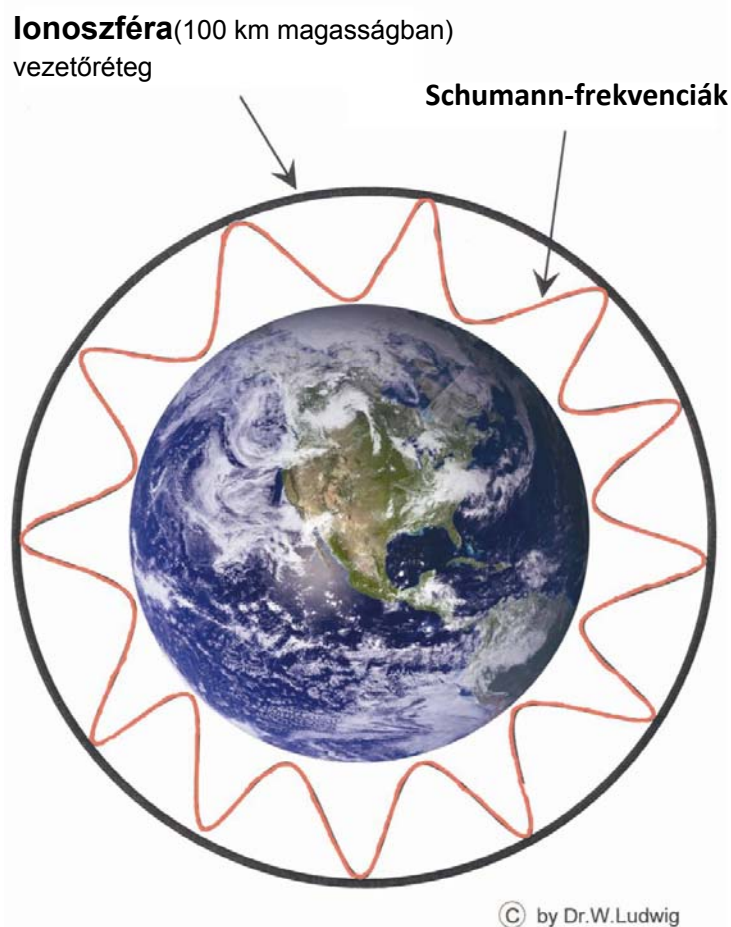


1. ábra: Schumann-frekvenciák

Az alaprezgés mértéke 7,8 Hz. Az emberi agy, a hippokampusz / hipotalamusz ugyanezzel a frekvenciával rezeg, ez testünk azon része, mely a figyelemért és koncentrációképességért felelős. Véletlen vagy evolúció?

Geomágneses frekvenciák

A földkéreg többek közt 64 elemet tartalmaz, melyek nyomelemként létfontosságúak. Ezen nyomelemek mindegyike sajátos, jellegzetes rezgési mintával rendelkezik. A föld mágneses mezeje ezen rezgési mintákat veszi fel. A rezgési minták felvételét ún. modulációnak nevezzük, a modulált mágneses mezőt pedig geomágneses frekvenciának (2. ábra). A földkéregben megtalálhatók ugyanazok az életfontosságú ásványi anyagok („nyomelemek”), mint az emberi test vörösvérsejtjeiben. Egymás közti viszonyuk szinte ugyanolyan.

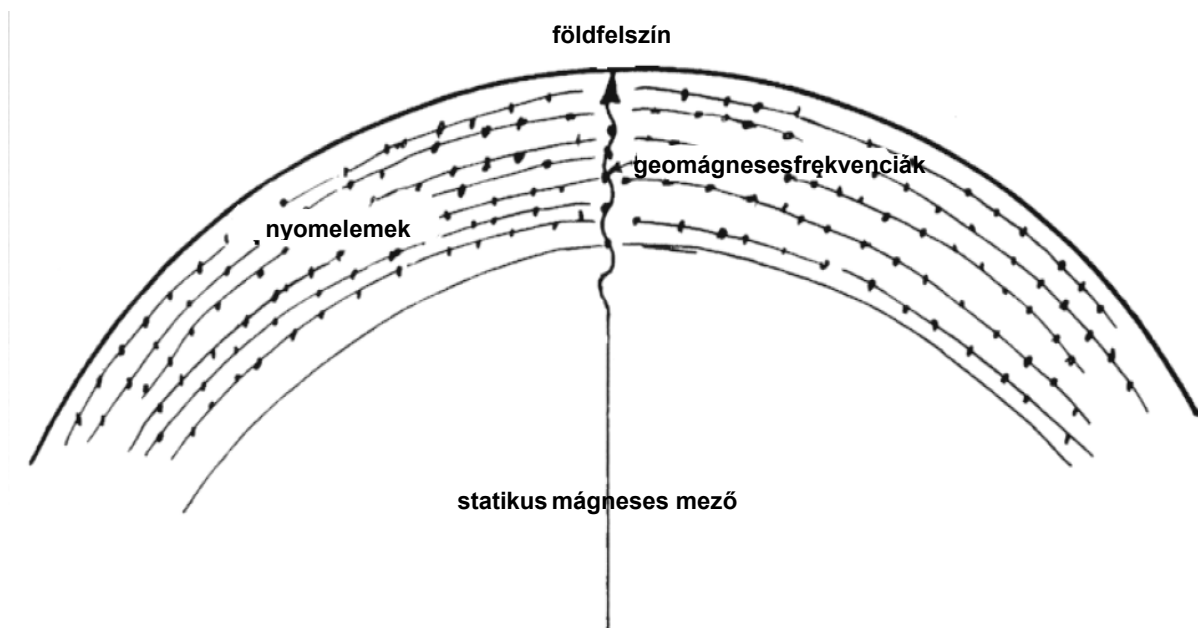

2. ábra: Geomágneses frekvenciák

Dr. rer. nat. W. Ludwig felfedezései alapján épített a NASA például Schumann- és geomágneses frekvencia-generátorokat legénységével felszerelt műholdjaiba. Az évezredek korú klasszikus kínai gyógy mód is kimondta már: „Az embernek legalább két környezeti jelre van szüksége, egy Yang-jelre fentről (Schumann-frekvencia) és egy Yin-jelre lentől (geomágneses frekvencia), melyek egyensúlyban állnak.



Csak a Dr. rer. nat. W. Ludwig által kifejlesztett mágneses terápiás eszközök termelnek olyan elektromágneses mezőt, mely a zavartalan természetet „olvassa le”, és amely ezt megfelelő viszonyok közt leképezi.

A 64 létfontosságú nyomelem frekvenciaspektrumát a világon egyedülálló eljárással állítják elő. Mágneses terápiás készülékeink mindegyikébe speciális antennát építettünk be mely egy tekercs hatására ezt a frekvenciaspektrumot kibocsátja.

Figyeljen ezért a fenti nyíl szimbólumra, a nemzetközileg elfogadott védjegyre.

2.1 A bioenergetika rezgések a megelőzés és a gyógyulást segítik elő

Az orvostudományban, mindenekelőtt a természetgyógyászatban a beteg állapotot „diszharmonikusnak”, az egészséges állapotot „harmonikusnak” tekintik. Ha a test a megfelelő harmonikus jeleket kapja, a szervezet azokat használni tudja, és az öngyógyítási folyamat megkezdődik.

2.2 Mágneses mezővel a természet és környezet zavarai ellen

Az emberiség sokféleképpen avatkozik bele a természet összhangjába, úgy mint az alapvízszint csökkentésével, szigetelő aszfalttal, vagy árnyékoló vasbetonházakkal, ezáltal a természetes Schumann- és geomágneses frekvenciák gyengülnek. A mesterségesen előállított hullámok, pl.: radar, rádió, TV állomások, mobiltelefon és szinte minden elektromos és elektronikus munka- vagy háztartási eszköz hullámai ezen természetes frekvenciákat elfedik, torzítják, ill. zavarják.

Számos állapotzavar („mikro-stressz”) összefügghet azzal, hogy manapság a természetes, harmonikus rezgések torz spektrumát kapjuk.

Ezek természetes lefolyásai, melyet mindannyian ismerünk, az időjárás olyan jelenségei, mint a fön vagy a viharok; itt is megfigyelhetők a Schumann- és geomágneses frekvenciák zavarai. Következésképpen pedig az, hogy feltűnően sok ember panaszkodik migrénre, dekoncentrációra, fej- és végtagfájdalomra. Egyre gyakrabban fordulnak elő manapság közlekedési balesetek is.

A mikroelektronikának köszönhetően lehetségessé vált, hogy a természetes, ill. harmonikus jeleket és a biológiai sejtrezgéseket meghatározott frekvencia-adagolással stimuláljuk, így az emberek és jó közérzetük érdekében alkalmazzuk

U.i.: Workshopokat és szemináriumokat is szervezünk. Kérje tőlünk programot és időpontot!

Az ön terméke a legjobb minőségű alapanyagok és alkatrészek felhasználásával készült, melyek újrahasznosíthatóak.

Amennyiben az alábbi szimbólumot találja a terméken, akkor a termékre a 2002/96/EK irányelv vonatkozik a termékre. Kérjük, érdeklődjön a helyi elektromos és elektronikus eszközök számára kijelölt gyűjtőhelyekről.

Kérjük, vegye figyelembe a helyi előírásokat és ne kezelje együtt készülékét a normál háztartási hulladékkal. A készülék helyes kezelésével hozzájárulhat a negatív környezeti következmények elkerüléséhez és az emberi egészséghez.



ADVANCED
MEDICAL
SYSTEMS

AMS GmbH
Hauptstr. 26
97990 Weikersheim, Germany

TEL:+49 (0) 79 34 / 99 34 89-0
TEL:+49 (0) 79 34 / 99 34 89-44
E-MAIL: info@ams-ag.de
www.ams-ag.de

Készült 2011/01